

Analizator CLINITEK Status® przeznaczony jest do użytku w diagnostyce in vitro:

- do półilościowego wykrywania albuminy, bilirubiny, krwi, kreatyniny, glukozy, ciał ketonowych, leukocytów, azotynów, pH, protein, ciężaru właściwego i urobilinogenu w próbkach moczu. Wymienione parametry zależą od rodzaju użytego testu paskowego do analizy moczu firmy Siemens.
- do półilościowego obliczania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego (A:C) oraz białkowo-kreatyninowego (P:C) w próbkach moczu przy użyciu testów paskowych CLINITEK® Microalbumin.
- do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu przy użyciu immunologicznego testu kasetowego Clinitest® hCG.

Z analizatorem CLINITEK Status® badanie moczu stało się proste

CLINITEK Status® ustanawia nowy standard badań moczu.

Analizatory CLINITEK Status® mogą mieć pozytywny wpływ zarówno na personel, jak i na pacjentów

Analizator umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników badania moczu i szybką reakcję lekarza na stan pacjenta.

- Odczyt dokonywany przy pomocy czytnika skraca czas oczekiwania na wynik i umożliwia poświęcenie większej uwagi pacjentowi.
- Wydruk wyników oszczędza czas i eliminuje błędy związane z przepisywaniem wyników.
- Usprawniony jest cały proces badania moczu.

Sprawdź, co zyskujesz

- Nowy poziom precyzji i wiarygodności
- Nowy standard wydajności
- Niesłyszana wygodę
- Niezwykłą łatwość
- Technologiczną doskonałość

Piśmiennictwo:

1. Tighe P. Improving the quality of urine strip testing: The Clinitek 50 Urine Chemistry Analyzer. Euro Clin Lab, June 997,16:20.

Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. oferuje szeroki pakiet rozwiązań w zakresie diagnostyki medycznej, które zapewniają efektywne sposoby diagnozowania, obserwacji i leczenia.

Nasze produkty i usługi w idealnych proporcjach łączą najnowsze osiągnięcia nauki, nowoczesne technologie i funkcjonalność w zakresie ochrony zdrowia.

Są źródłem podstawowych informacji, niezbędnych do zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjentów na całym świecie.

© 2009, Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Nr ref. A1DX-0351062-C2-5500.
Wydrukowano w Polsce.

Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
tel. +48 22 870-80-59
fax: +48 22 870-80-80
www.siemens.pl/diagnostyka

**Global Siemens
Healthcare Headquarters**

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Germany
Telephone: +49 9131 84 - 0
www.siemens.com/healthcare

www.siemens.com/diagnostics

Czy wciąż wizualnie odczytujesz paski do badania moczu?



Analizator CLINITEK Status® – badanie moczu staje się proste i wiarygodne

Answers for life.

SIEMENS

Badanie laboratoryjne moczu stało się niezbędne w opiece zdrowotnej

- Pozwala zdiagnozować wczesne etapy wielu chorób, takich jak cukrzyca, choroby nerek, zakażenia dróg moczowych, a nawet nowotwory.
- Umożliwia monitorowanie przebiegu choroby oraz wprowadzenie właściwego leczenia pacjenta.
- Pozwala na szybkie i łatwe wykonanie testu hCG.
- Obniża koszty leczenia.

W dzisiejszych czasach badanie moczu metodą wizualną nie jest najlepszym rozwiązaniem. Odczyt wizualny jest subiektywny, co powoduje różnicowanie wyników i zwiększa odsetek błędów, skracając jednocześnie czas poświęcony pacjentowi.

Wykazano, że badanie moczu wykonane na analizatorach charakteryzuje się większą czułością testu, a wątpliwe wyniki badań są prawidłowo rozpoznawane i odnotowywane.¹



Analizator CLINITEK Status® został zaprojektowany do uproszczenia rutynowych badań


Analizator automatycznie oblicza wskaźniki albuminowo-kreatyninowy i białkowo-kreatyninowy, przydatne w badaniach przesiewowych w kierunku mikroalbuminurii i monitorowaniu chorób nerek.

Łatwa obsługa i wygodna komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.

Wyświetlana na ekranie klawiatura umożliwia wprowadzenie informacji o pacjencie oraz ID operatora, pozwalając na szybkie wyszukiwanie wyników.



Wyniki wyświetlane na ekranie, mogą być drukowane i/lub wysłane do komputera.

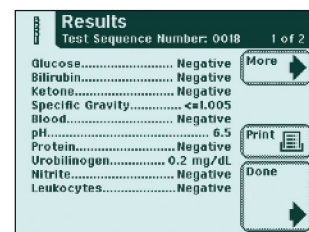

Wbudowana drukarka wewnętrzna eliminuje błędy przy przepisywaniu i oszczędza czas.



Analizator ułatwia zarządzanie danymi – zapamiętuje wyniki 200 testów.

Analizator odczytuje testy paskowe Multistix® 10 SG, CLINITEK® Microalbumin oraz kasetki testu ciężarowego Clinitest® hCG.


Analiza moczu w kilku prostych krokach



**Krok 1
Wybierz rodzaj testu**
Łatwy w obsłudze ekran dotykowy pozwala w prosty sposób wybrać pożądany test. W tym celu wybierz z menu analizatora rodzaj testu paskowego.



**Krok 2
Wykonaj badanie**
Zanurz pasek Multistix® 10 SG lub CLINITEK® Microalbumin w próbce moczu, usuń nadmiar moczu i umieść go na stole analizatora CLINITEK Status®. Dalej analiza zostanie przeprowadzona automatycznie.

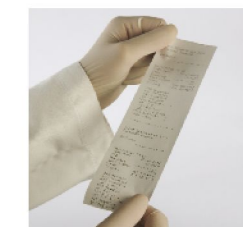

**Krok 3
Zobacz wyniki**
Po zakończeniu analizy wyniki zostaną wyświetlone na ekranie analizatora CLINITEK Status® i automatycznie wydrukowane.



Uniwersalna wkładka stolika testowego może współpracować z paskiem do analizy moczu oraz z kasetą do testu immunologicznego.